

Registrering av implantat



Nasjonalt Register for Leddproteser
Nasjonalt Hoftebruddregister
Nasjonalt Korsbåndregister

Pscan.Procordo.com

Registrering av implantater må skje med skanner via nettsiden Pscan.Procordo.com

Vi anbefaler at Operasjonssykepleier utfører registrering på operasjonsstuen.

Etter registrering av implantater vil du motta en Operasjons-ID som skal oppgis av Kirurg i operasjonsskjemaet h*n sender inn til registeret.

Systemet lagrer data uten å knytte det til pasienten. Det skjer først når kirurgen fyller ut operasjonsskjemaet i Medisinsk Registreringssystem (MRS) og henter data fra Procordo.

Løsningen blir levert av Procordo ApS.

Sign In

Sign in using your registered username and password

Username

Password

Sign In

Disclaimer - Procordo makes no expressed or implied warranty regarding the correctness of implant information. The selection and combination of implant parts remains the responsibility of the health care professional.

Din avdeling skal ha mottatt brukernavn og passord for innlogging. Om din avdeling mangler innlogging, ta kontakt med brukerstøtte.

Kontakt brukerstøtte:

Telefon **90 58 31 74**

Epost: NRL-support@Helse-Bergen.no

Tips: Arket dere mottar med innloggingsdetaljer bør skrives ut og lamineres til bruk på operasjonsstuen.

Sett gjerne siden pscan.procordo.com som favoritt i nettleser (se side 15)



Skannerne dere tar i bruk må være kompatible med systemet. Og de må også kunne skanne QR koder. Dere må gå til innkjøp av en av følgende anbefalte skannere:

- ZEBRA DS2278
- ZEBRA DS2208
- OPTICON SENSORS OPI-3601


Konfigurering av skanner

Første gang dere tar i bruk ny skanner, bør det testes hvorvidt skanneren er riktig konfigurert. For riktig konfigurering av eksisterende eller ny skanner logger du inn på Pscan.Procordo.com


I menyen velger du «Test and configure scanner» og følger instruksjonen.

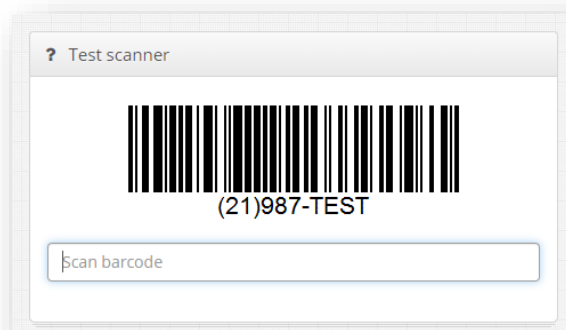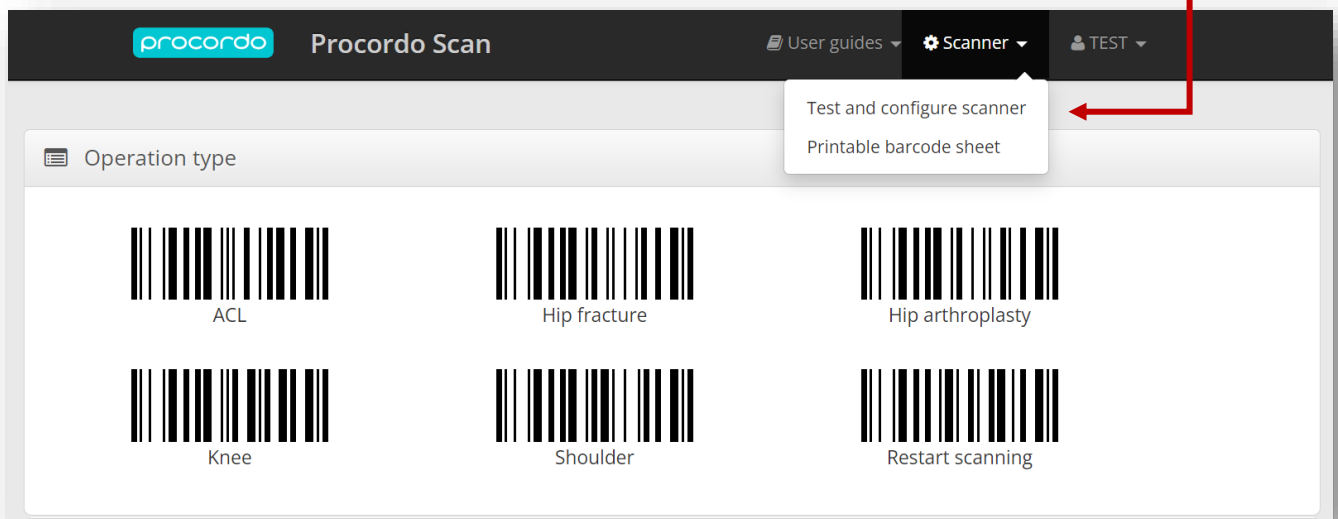

Skann strekkoden for å teste hvorvidt den er konfigurert.

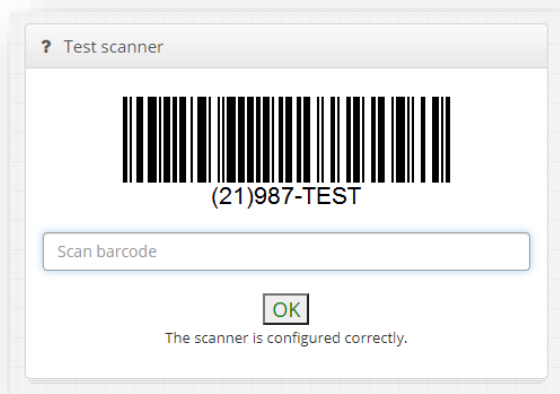

Hvis skanneren er korrekt satt opp får du melding **OK**, og du kan starte å ta i bruk skanneren.

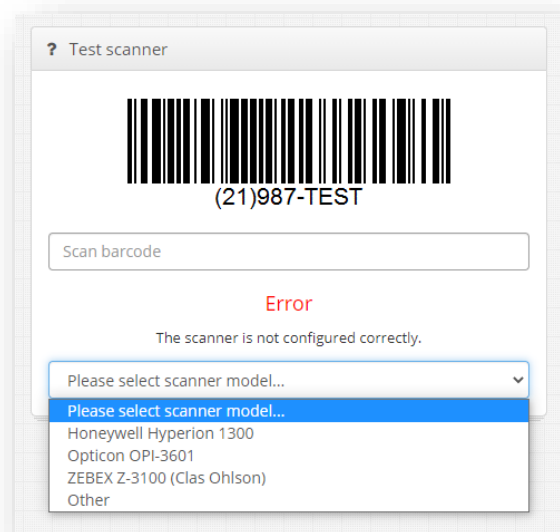


Om skanneren ikke er korrekt satt opp vil du få meldingen **Error**

Velg din skanner i listen over kompatible skannere. Finnes den ikke velger du «Other» og fyller ut informasjon om skanneren.

Du får opp en QR-kode, eller ett sett med strekkoder du skal skanne i en gitt rekkefølge. Avslutt med å trykke «**Test scanner again**» og du kan teste på nytt hvorvidt skanneren ble riktig konfigurert.

Zebra DS22xx/DS81xx series - To configure scanner, please scan the 2D code below.

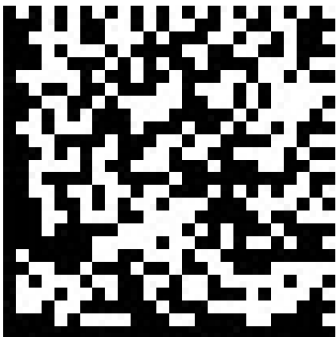

Test scanner again

Hva skal registreres/skannes

For leddproteser:

- Alle sementer og komponenter til proteser skal skannes.
- Det er ikke nødvendig å skanne skruer og centralizer.
- Sementrestriktor /plugg skal registreres for hofteoperasjon, men ikke nødvendig for kne og skulder.
- Har du brukt samme pakke sement på både femur og tibia må sementen skannes to ganger.

For hoftebrudd:



- Alle hovedkomponenter til de ulike implantatene skal skannes.
- Ved operasjon med glideskrue, skal collumskrue, plate og eventuell løs støtteplate registreres.
- Ved marnagling skal collumskrue(r) og nagle registreres, men ikke distale sperreskruer.
- Ved hemiproteser, registreres stamme, caput og hemikopp.
- Eventuelle distale sperreskruer i protese skal ikke registreres.
- Cerclager skal ikke registreres
- Sement skal skannes dersom dette er brukt.

For korsbånd:

- Alle fiksasjoner til ACL/PCL/LCL/PLC/MCL skal skannes, og implantat for meniskfiksasjon, f.eks. Fastfix eller Truespan.
- Du trenger ikke å registrere suturmateriell som vicryl, fiberwire, eller lignende.
- Ankere skal registreres.



Fremgangsmåte

Etter innlogging til pscan.procordo.com velger du riktig operasjonstype fra menyen øverst:

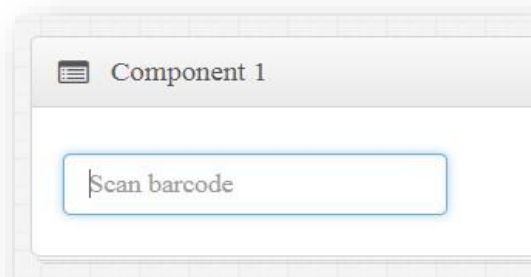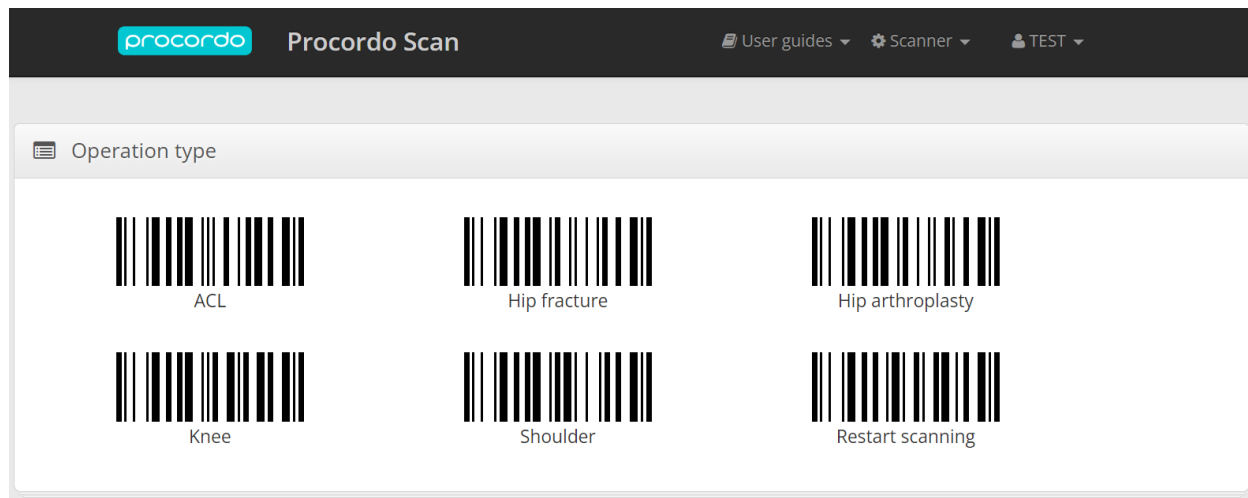

Startsiden består av et tekstfelt til venstre «Scan barcode», der tall, tegn og bokstaver fra strekkodelesingen blir synlig.

Til høyre finnes det etter hvert en strekkode som varierer noe avhengig av hvor du er i registreringen. Den vil enten vise «**Component done**» eller «**Operation done**»

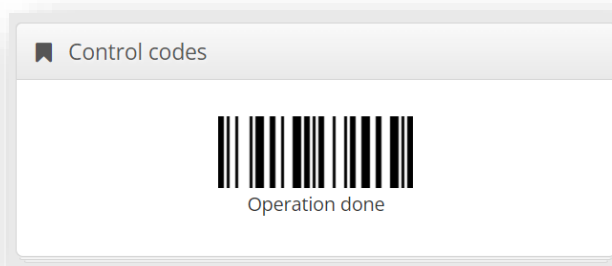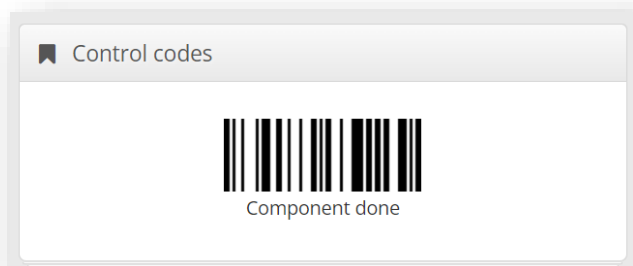

OBS. Sett markøren i feltet «Scan barcode» før du starter skanning.

Du kan skanne alle strekkoder/QR-kode du finner på produktpakken/klistrelappen. Du bør ha med alle de tre boksene **REF** **EXP** **LOT** for at det skal være en gyldig skanning. Slik det ser ut her:

0100889024263628172712311064613040	REF	EXP	LOT
Scan barcode			

Eller slik:

01106032950277442012	REF		
17240630105345273	EXP	LOT	
Scan barcode			

Du vil finne igjen disse feltene på klistrelappen eller esken som i eksempelet under:

Referansenummer (REF) →

Sporingsnummer (LOT/SN) →

Holdbarhetsdato (EXP) →

Catalogue Number REF 166943

Lot Number LOT J7034178

Use-by YYYY-MM-DD 2031-05-24

Oxford® Partial Knee System
Twin Peg Cemented Femoral
Size Large
Warning Do Not Resterilise
Co-Cr-Mo
QTY: 1

STERILE
Sterilized
Using
Irradiation

DO NOT REUSE

**DO NOT USE
IF PACK
DAMAGED**

MR


CE 2797


BIOMET
Biomet UK Ltd.
Waterton Industrial Estate
Bridgend, South Wales
CF31 3XA, United Kingdom

MERK: For at skanningen skal bli godkjent, må du som ett minimum ha skannet REF nummeret.

Når strekkodene er skannet og du har fått opp de tre boksene, kan du kontrollere at implantatet er kommet inn riktig:

#	Product Description	Supplier	Product Reference REF	Lot/serial LOT SN	Expires EXP	Placement
2	OXF PKS CEMENTED TWIN PEG FEM COCR LRG	Biomet	166943	J7034178	2031-05-24	Femur


Ofte vil system automatisk registrere plassering eller type implantat . Kontroller og korriger ved behov. Eller legg inn riktig plassering om dette ikke kommer automatisk. MERK: Kirurg kan enkelt korrigere eller legge dette inn i etterkant, om du er usikker.

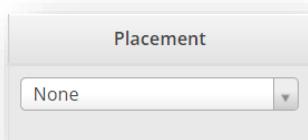

Placement

None


Du kan velge plassering for skulder- og kneoperasjon.

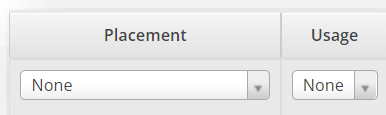

Placement Usage

None None

For korsbåndoperasjon får du opp spørsmål om plassering og til hvilken struktur.

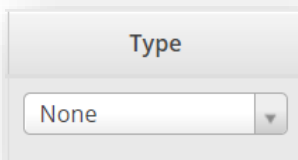


Type


None

For hoftebrudd og hofteproteser finner du tilsvarende felt, men hvor det blir etterspurt type implantat «Type»

Når implantatet er registrert; skann/klikk på strekkoden «**Component done**» Og gjenta prosedyren for neste implantat:

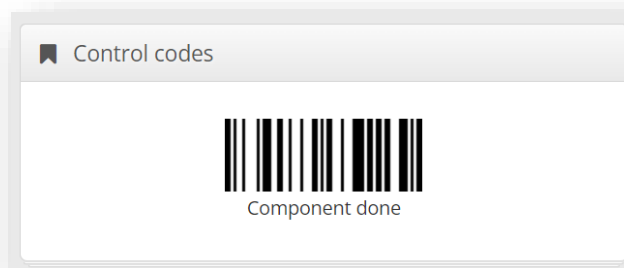

Når du er ferdig med alle komponentene skanner du «**Operation done**» strekkoden:

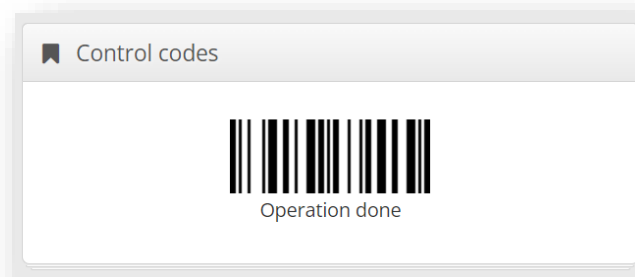

Etter å ha registrert alle komponentene, og valgt «Operation done» får du frem følgende bilde:

This operation was recorded with operation ID: 2997

Id	Description	Manufacturer	Product code
#1	NexGen® Tibial insert, Height 10 Millimeter, Size Green / C-H	Zimmer, Inc.	90-5970-40-10
#2	NexGen® Uncoated knee femur prosthesis, metallic, Size F	Zimmer, Inc.	5966-16-02
#3	NexGen® Complete Knee Solution Uncoated knee tibia prosthesis, metallic, Size 6	Zimmer, Inc.	5980-47-02


Print New operation Logout

Noter «operation ID» nummeret. Dette nummeret skal registreres av kirurg i Nasjonalt Register for Leddproteser og kobler komponentene som er lagret til den aktuelle pasienten.


MERK: Skulle du være uheldig å glemme en komponent er det bare å gjenta prosessen og ta vare på begge ID-numrene.

MERKNAD

Dersom du ønsker å fjerne implantatet fra listen kan du trykke på «Delete»-knapp til høyre:

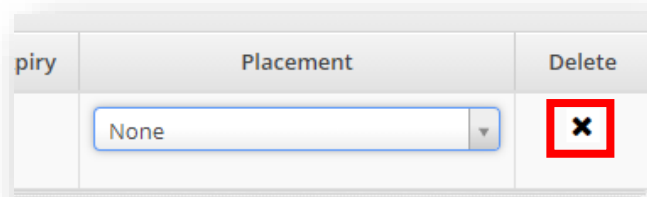

Vær OBS på at markøren må stå i feltet med teksten «Scan barcode» når du skanner komponenter:

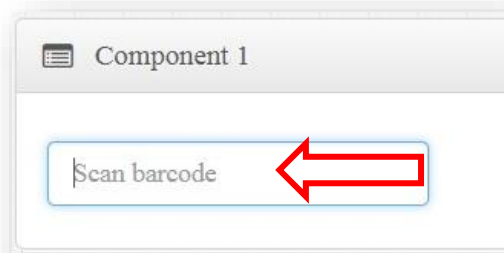

Registrering av sement for skulder- og kneoperasjon

Hvis det er brukt samme pakke sement til å feste flere komponenter, må samme klistrelapp skannes flere ganger og markeres med «Placement» for hver.

Om det for eks. er brukt to ulike pakker sement, skal begge pakkene/klistrelappene skannes da de kan stamme fra forskjellig vareparti (LOT) og ha ulik holdbarhetsdato (EXP)

#	Product Description	Supplier	Product Reference	Lot	Expiry	Placement
1	PALACOS R+G pro net 75	Heraeus Medical GmbH	66044274			Femur
2	PALACOS R+G pro net 75	Heraeus Medical GmbH	66044274			Tibia

Feilmeldinger

Multiple components scanned

Hvis du f. eks. glemmer å skanne/trykke «Component done» mellom flere produkt.

Product barcode not scanned

Om du for eks. bare skanner LOT og EXP men ikke tar med REF.

Uncertain product match

Du har fått treff på strekkoden, men systemet er usikker hvorvidt det er et riktig produkt. Sjekk derfor hva som ble registrert.

MULTIPLE COMPONENTS SCANNED



You have scanned product barcodes for more than one component. This may result in multiple, but *possibly incorrect* matches, as well as incorrect expiration date and lot number.

To correct this problem do as follows:

- Always make sure that you only scan barcodes from *one box* at a time.
- Delete the component from the list, and rescan only barcodes from the correct box.

Ok

PRODUCT BARCODE NOT SCANNED



A barcode containing a precise product number was not scanned, and no product was found using other barcodes.

To correct this problem do as follows:

- Delete the component from the list, and rescan *all* barcodes on the component box.

- or -

- Register this component as a new product. Type in the Product Description, Supplier and Product Reference exactly as printed on the box. The Procordo support team will verify your input, and add the product to the system.

Ok

UNCERTAIN PRODUCT MATCH



A barcode containing a precise product number was not scanned. Barcodes were tried as product numbers, which resulted in a single match.

You should carefully verify that the selected product is the correct one.

To correct this problem do as follows:

- Always make sure that you scan *all* barcodes on the box.
- If the correct product is found in the Product Description list below, select it from the list.

- or -

- Delete the component from the list, and rescan *all* barcodes on the component box.


Ok

Manuell registrering av implantat, ved feilmelding.

«Unregistered Product Number»

Ved denne feilmeldingen har du skannet ett produkt som ikke ligger inne i databasen til Procordo. Årsaken kan være at produktet/implantatet er nytt eller at strekkoden er ny. Du må da registrere produktet manuelt. (Se neste side)

UNREGISTERED PRODUCT NUMBER



The scanned product barcode did not match a known registered product. Barcodes were tried as product numbers, which resulted in multiple, but *possibly incorrect*, matches.

To correct this problem do as follows:

- If the correct product is found in the Product Description list below, select it from the list.

Product Description - or -


- Register this component as a new product. Type in the Product Description, Supplier and Product Reference exactly as printed on the box. The Procordo support team will verify your input, and add the product to the system.

Ok

«Multiple Products Found»

Ved feilmelding har systemet fått flere treff på strekkoden. Og du får en liste med aktuelle treff. Om du ikke finner riktig komponent i listen, må du også her registrere produktet manuelt. (Se neste side)

MULTIPLE PRODUCTS FOUND



A barcode containing a precise product number was not scanned. Barcodes were tried as product numbers, which resulted in multiple, but *possibly incorrect*, matches.

To correct this problem do as follows:

- Always make sure that you scan *all* barcodes on the box.
- If the correct product is found in the Product Description list below, select it from the list.

Product Description - or -

- Delete the component from the list, and rescan *all* barcodes on the component box.

- or -


- Register this component as a new product. Type in the Product Description, Supplier and Product Reference exactly as printed on the box. The Procordo support team will verify your input, and add the product to the system.

Ok

Manuell registrering av implantat


Ved feilmelding, dukker det opp en linje med varsel trekant. Her kan du nå skrive inn produktbeskrivelsen, leverandør og referansenummeret:

1. Klikk i feltet for produktbeskrivelse

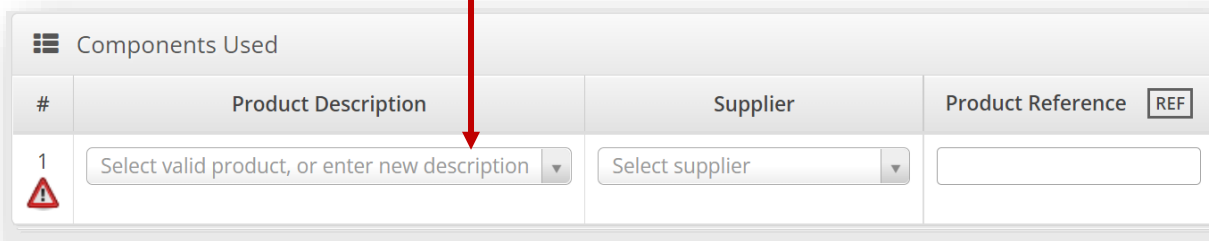


The screenshot shows a table titled "Components Used" with three columns: "#", "Product Description", "Supplier", and "Product Reference" (with a "REF" button). The first row has a red warning triangle icon in the "#" column. The "Product Description" field contains the text "Select valid product, or enter new description" and a dropdown arrow. A red arrow points from the text above to this field.

2. Om du finner riktig implantat i listen, velger du dette. Om ikke, klikker du i det tomme feltet og starter og skrive inn en produktbeskrivelse

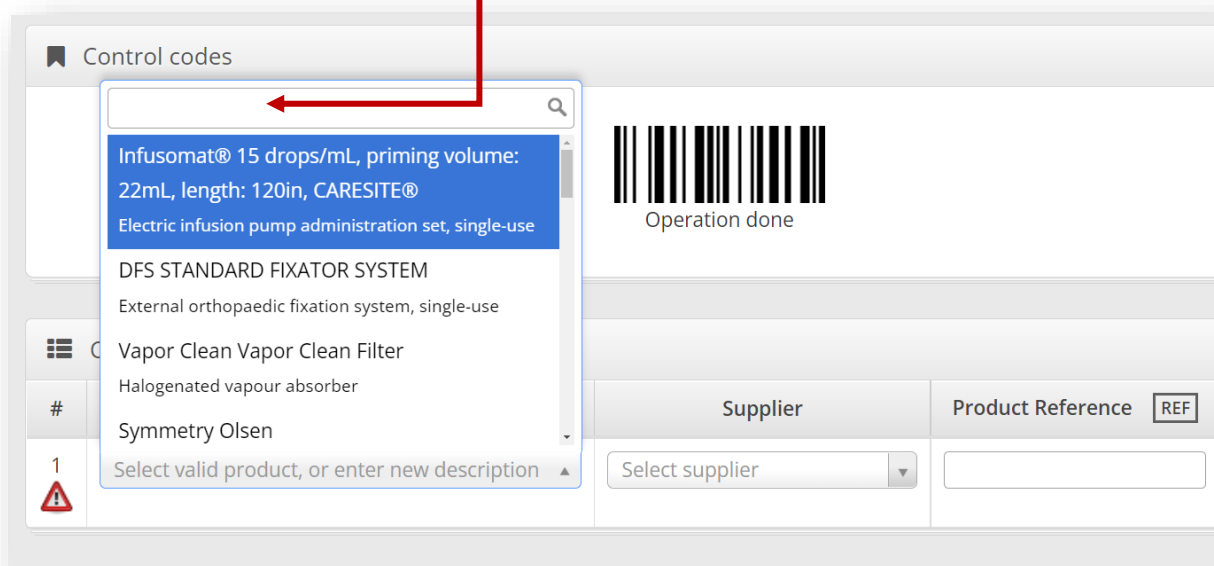

The screenshot shows the "Control codes" dropdown menu open. It lists several items, with "Infusomat® 15 drops/mL, priming volume: 22mL, length: 120in, CARESITE® Electric infusion pump administration set, single-use" highlighted in blue. A red arrow points from the text above to this highlighted item. In the background, a barcode and the text "Operation done" are visible.

3. Etter du har skrevet inn en produktbeskrivelse, klikker du på det blå feltet.

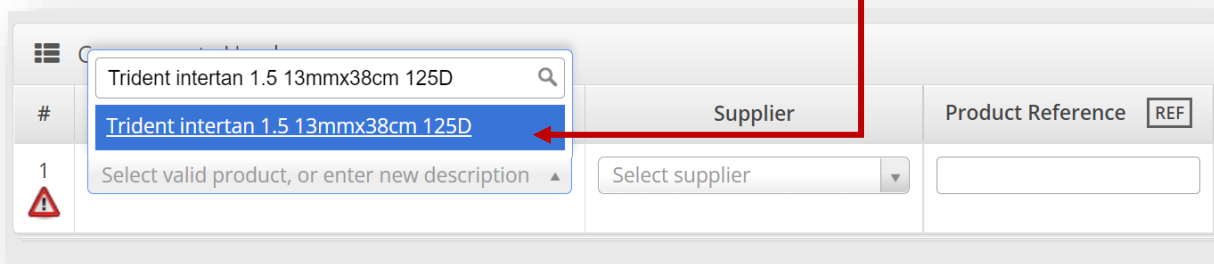

The screenshot shows the "Components Used" table with the "Product Description" field containing the text "Trident intertan 1.5 13mmx38cm 125D". The dropdown menu is open, and the same text is highlighted in blue. A red arrow points from the text above to this highlighted item.

4. Skriv også inn leverandør og referansenummeret, og produktet blir registrert.


MERK: Feltene for LOT-nummer og EXP, er valgfritt å utfylle.

#	Product Description	Supplier	Product Reference
1	Trident intertan 1.5 13mmx38cm 125D	Select supplier	REF

Referanse nummer:

Produktbeskrivelse:

Leverandør:

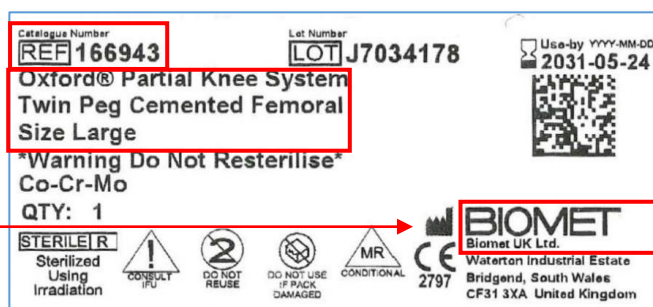

For at implantatet skal bli raskt registrert i databasen, er det til stor hjelp om dere sender ett tydelig bilde av klistrelappen. Da slipper dere og andre å registrere komponenten manuelt for fremtiden.

Bildet kan sendes via MMS til telefon nr. **90 58 31 74** eller epost nrl-support@helse-bergen.no

Feilsøking



Feil	Mulig årsak
Det skjer ikke noe når jeg skanner	Skanneren er ikke konfigurert. Markøren er ikke i feltet «Scan barcode», eller «Username/Password» ved innlogging.
Jeg får ikke skannet strekkoden	Prøv å legge strekkoden mot et hvitt underlag, f. eks. et tomt A4 ark. Ved skanning fra PC-skjerm; skru opp lysstyrken på skjermen.
Det kommer ikke opp noe implantat etter at jeg har skannet alle strekkoder og trykker «component done»	Prøv også strekkodene som er på selve pakken til implantatet. Produktet er skannet for første gang i databasen. Se side 12.
Det kommer ikke samme tegn i tekstboksen som står under strekkoden når jeg skanner	Skanneren er ikke riktig satt opp med norsk språk – test skanneren under menyen oppe til venstre «Skanner – Test and configure scanner»
Det kommer opp feil implantat når jeg har skannet alle strekkoder	Send mail til nrl-support@helse-bergen.no ta gjerne et tydelig bilde av esken med alle strekkoder.
Andre feil som ikke er nevnt	Send mail til nrl-support@helse-bergen.no

Lagre nettside som favoritt


Chrome

Åpne nettsiden du vil lagre som favoritt.

Ta tak i hengselåsen, dra den ned på favorittlinjen og slipp.

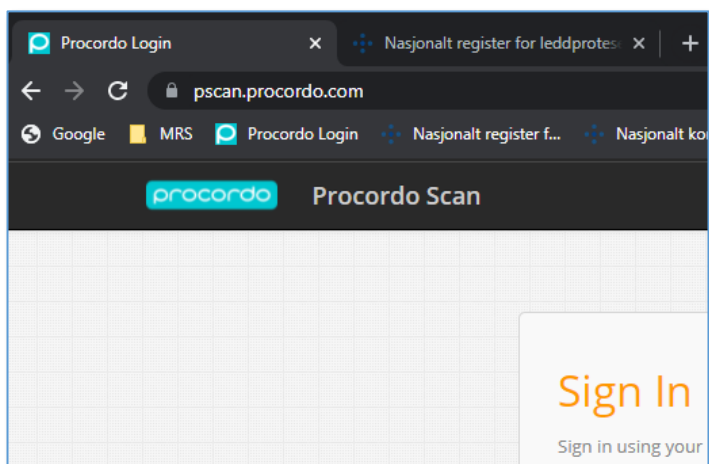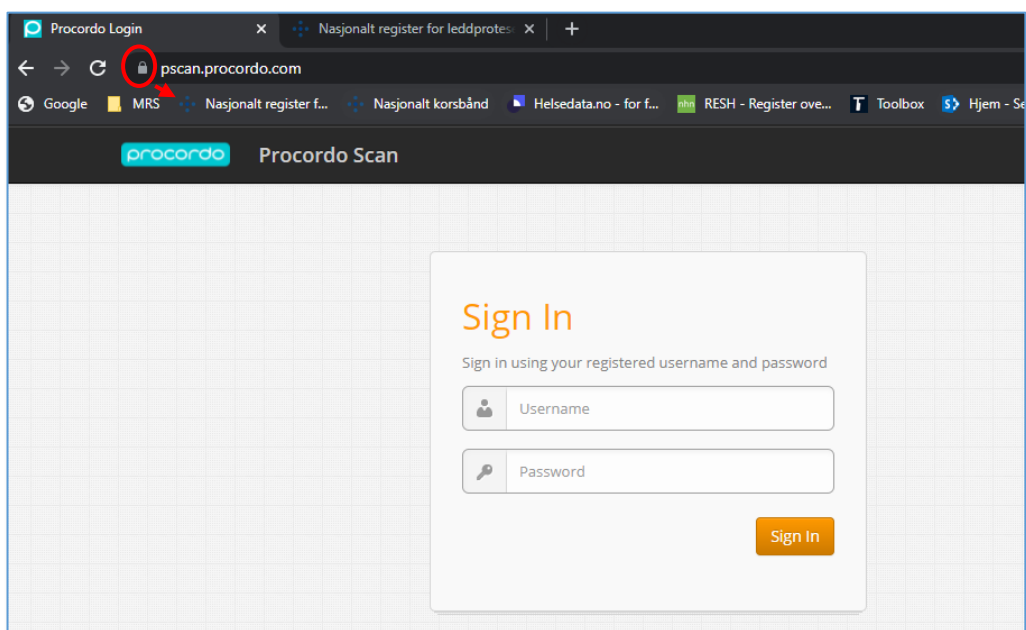

Hvis ikke favorittlinjen vises velger du de tre prikkene oppe til høyre → «Bokmerker» → «Vis Bokmerkerad»

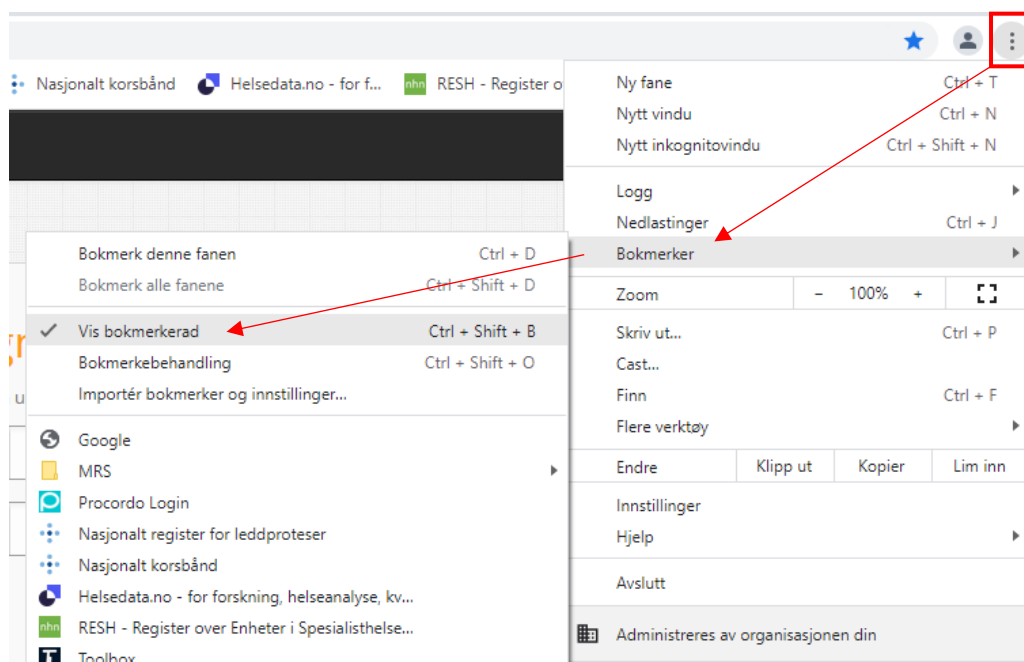

Edge

For å legge til favoritten er det samme fremgangsmåte som i Chrome.

For å vise favoritt linjen om den ikke er synlig velger du de tre prikkene → «Favoritter».

I neste meny velger du igjen de tre prikkene og «Vis Favoritter-feltet» → «Alltid»

