



en veiledning for pasienter

rengjøring av gjenbruksprøyter


TREKK OPP OG SKYLL

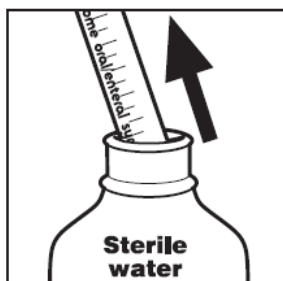

Trekk opp sterilt vann dersom pasienter er mindre enn 1 år gamle og immunokompromittert

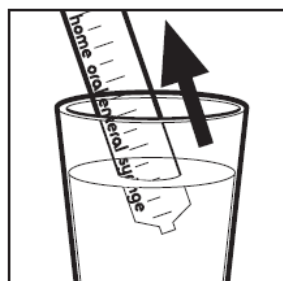


Trekk opp med springvann eller nedkjølt kokt vann

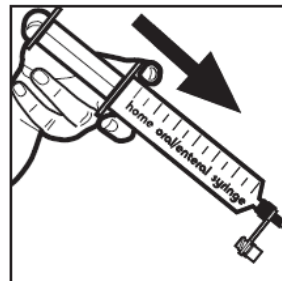


Skyll sprøyte og innretning for næringstilførsel

RENGJØRING

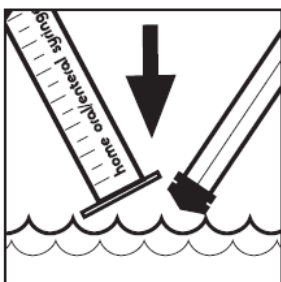

Skill sprøyten og stempellet og vask sprøyten grundig i varmt såpevann.

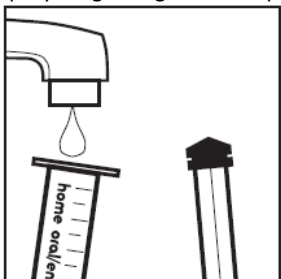

Skill sprøyten, skyll med kaldt springvann og tørk med papirhåndkle. Oppbevar i tørr beholder.

- Etter bruk rengjør du sprøytene med en gang
- Legg sprøyten i varmt såpevann
- Rengjør enden av sprøyten ved å trekke såpevann inn og ut med stempellet til alle spor av næringstilførsel eller medisin er fjernet.

Skill sprøyte og stempel og vask grundig i varmt såpevann


- Skyll begge deler av sprøyten under springen, rist av overflødig vann
- Tørk med rent tørkepapir (ikke oppvaskklut eller kjøkkenhåndkle)
- Oppbevar sprøyten fortsatt atskilt i en ren, tørr beholder med lokk.
- Ikke legg den i oppvaskmaskinen, da det kan redusere sprøytenes levetid.

Hvis sprøyten blir vanskelig å bruke mens den benyttes, merkene blir uklare eller det er synlig skade på sprøyten, må du kaste den og begynne å bruke en ny.

KAST ETTER 7 DAGER



Kast etter maksimalt 7 dager

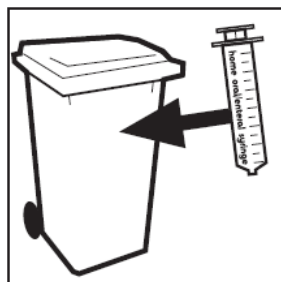

Kast i husholdningssøppelet

Medicina HE-sprøyter er laget for å brukes med alle former for tilførsel av kunstig ernæring og medisiner som legen din gir deg. De kan rengjøres og brukes om igjen opptil 40 ganger over en periode på 7 dager for samme pasient. Ikke prøv å bruke en annen type Medicina-sprøyte på nytt – de fleste er ikke laget for gjenbruk og leveres sterile. Gjenbruk av en steril sprøyte kan sette pasientens helse i alvorlig fare, særlig hvis pasienten er immunokompromittert eller er særlig sårbar for infeksjoner.

Advarsler

Klinikere – Pass på at hjemmebrukere får tilstrekkelig opplæring i hvordan de håndterer tilførsel av kunstig ernæring/medisin, og også i hvordan de rengjør og vedlikeholder sprøyten. Sikre at hjemmemiljøet egner seg for gjenbruk av utstyr for tilførsel av kunstig ernæring. Bekreft at ernæringen og medisinene fungerer med sprøyter av polypropylen. For pasienter som er yngre enn 1 år eller immunokompromittert, må du vurdere å instruere brukeren i å legge sprøyten i kald steriliserende løsning. Du må bare koble til sprøyten som forklart og ikke prøve å koble den til en annen komponent. Brukes bare med næringstilførsler og medisiner som er foreskrevet deg av en kliniker. Hvis du bruker andre væsker, må du kaste sprøyten og bruke en ny.

Følg rengjøringsinstruksjonene i denne brosjyren – Bruk varmt vann og oppvaskvæske og ikke noe annet - ikke bruk kokende vann, en oppvaskmaskin eller den dampsterilisator for å rengjøre sprøyten. Ikke bruk vaskekluter, skuresvamper eller børster osv. - bruken av andre materialer kan skade overflatefinishen og påvirke sprøytens ytelse. Hvis du gjør det, må du kaste sprøyten og bruke en ny. Som med andre medisiner eller næringstilførsler må du unngå kontakt med andre væsker hvis de ikke er foreskrevet.

Bruksanvisning

Ikke bruk sprøyten hvis den ser skadet ut, eller hvis den har falt i gulvet – kast og bruk en ny sprøyte.

Den må bare brukes til å tilføre væsker som du har fått foreskrevet.

Fyll sprøyten slik du har lært – bruk sprøyte med korrekt størrelse for det volumet som skal tilføres - fyll og blås ut luft til du har korrekt volum som vist samtidig som du er nøye med å ikke fylle sprøytespissen. Hold sprøyten slik at hånden ikke skygger for graderingene når du fyller, dette gjør det lettere å være nøyaktig.

Rengjøringsveiledning

Rengjør sprøyten umiddelbart etter bruk – hvis du ikke gjør det, kan det føre til at sprøyten blir forurenset med tørr næringstilførsel eller medisin som kan skape problemer hvis de blandes med ferske væsker. Trekk stempelet ut til enden av røret og beveg det forsiktig fra side til side mens du trekker forsiktig – stempelet kommer ut av røret. Rengjør røret og stempelet kun i varmt såpevann – ikke bruk andre rengjøringsvæsker. Pass særlig på stempelets pakning og tuppen av røret.

Skyll røret og stempelet i kaldt springvann og pass på at alt såpevannet skylles bort. Legg på ren, fersk tørkerull eller papirhåndkle for å tørke. Unngå å berøre stempelets pakning eller innsiden av røret. Sette sammen igjen – Inspiser røret og stempelet for å sikre at det ikke er spor av næringstilførsel eller medisin – kontroller at innsiden av røret er fri for skrap eller avslitninger, og at pakningens overflate ikke er skadet eller vridd – den må ligge flatt og sikkert i sporet på stempelet. Sett så stempelet forsiktig tilbake i røret og skyv stempelet gjennom hele røret til forsiden nesten berører den andre enden av røret – Oppbevar den rekonstruerte sprøyten i en tørr beholder klar til neste gangs bruk. Hvis sprøyten ikke kan rengjøres effektivt eller er skadet, må du kaste den og bruke en ny sprøyte. Rengjørings- og skyllevannet kan tømmes som normalt – det er ikke noe behov for spesielle forholdsregler.

Hvis du blir instruert om det, kan du plassere sprøyten i kald steriliseringsløsning. Følg produsentens veiledning. La sprøytene ligge i steriliseringsvæske så kort tid det er tillatt, vanligvis 15 minutter. Hvis sprøyten ligger lengre i væsken, kan det i betydelig grad redusere sprøytens levetid ved å fjerne markeringene eller gjøre den vanskelig å bruke.

Sprøyten må bare brukes i maksimalt syv dager eller 40 vaskinger før den kastes og en ny tas i bruk. Sprøyten vil kanskje ikke fungere effektivt hvis den brukes etter at denne syv-dagers perioden er over. Ikke forsøk å bruke sprøyten hvis merkingen er uklar eller den er stiv eller vanskelig å bruke. Rengjør sprøyten før den kastes, og kast sprøyten som husholdningsavfall som ikke skal resirkuleres – ikke legg sprøyten i en resirkuleringscontainer.