

Hostemaskin NIPPY CLEARWAY 2

RENHOLD, VEDLIKEHOLD OG SERVICE I HJEMMEBRUK

VIKTIG

For å unngå elektrisk støt, skal hostemaskinen alltid være frakoblet strømkilde når den rengjøres.

RENGJØRING

Det anbefales å holde apparatets overflater rene, kontrollere at luftinntaksåpningene ikke er blokkerte og holde apparatet unna gardiner, tepper eller utstyr som produserer varme.



Apparatet

Apparatets overflater kan vaskes med mild såpe og fuktig klut, eller med bakteriedrepende middel (for eksempel 70 % isopropylalkohol).




Pasientkretsen med maske

- Maske vaskes grundig med såpe og vann etter bruk.
- Dersom det kommer slim i slangen, kan dette og adapter vaskes på samme måte.
- Delene lufttørkes eller tørkes med vannabsorberende papir.
- Delene må være fullstendig tørre før de brukes igjen.
- Det anbefales å bytte slangesettet en gang pr. 1-2 uker.
- Bakterie -/ virus filteret, som beskytter apparatet mot fremmede partikler fra pasienten, kan brukes så lenge det ikke er tett pga fuktighet eller spytt. Bakterie -/ virus filteret kan ikke vaskes.

BYTTE LUFTINNTAKSFILTER

Luftinntaksfiltrene er plassert på baksiden av hostemaskinen og åpnes ved å fjerne filterhuset. Der er det to type filtre:

1. Det grå filteret bør vaskes eller støvsuges en gang pr uke.
2. Det hvite filteret er engangsfiler og bør byttes hver 4. uke.

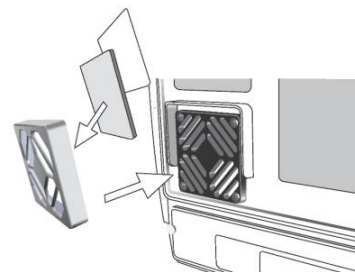

BESTILLING AV FORBRUKSUTSTYR

Nye slangesett og forbruksutstyr bestilles via:
Seksjon for Behandlingshjelpemidler
Tlf.

SERVICE

Maskinen blir kalt automatisk til service en gang pr. året.
Servicen utføres av: Seksjon for Behandlingshjelpemidler
Tlf.

Du har pasientkrets:

Slangelengde

Maskestr