

Cytologiske prøver

Væskebasert cervixcytologi



Prøven tas fra portio/cervix med enten endocervikal børste og plastspatel eller Rover® Cervexbrush. Prøvematerialet overføres til ThinPrep® Pap test prøvebeholder, som inneholder en metanolholdig fikseringsvæske.

1. Bruk av endocervikal børste/plastspatel

Før inn plastspatelen i vagina slik at den ligger an mot portio, og drei 360°. Skyll spatelen raskt i fikseringsløsningen og rist kraftig x10. Kast spatelen.

Før så endocervikalbørsten inn i livmorkanalen og rotér sakte ¼ til ½ omdreining. Skyll børsten raskt i samme prøvebeholder ved å rotere børsten mens den presses mot veggen av beholderen x10 (slik skaftet på børsten bøyes litt under omrøringen), og rist et par ganger ”fritt” til slutt. Kast børsten.


Skru godt igjen lokket på beholderen, svart punkt på lokk skal stå over svart punkt på beholder.

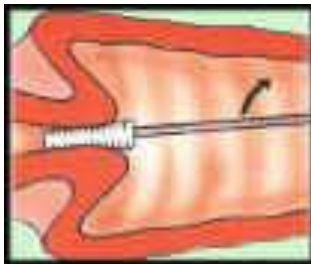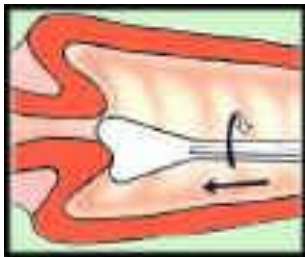

2. Bruk av Cervexbrush

Før inn børsten i livmorkanalen slik at de sentrale deler av børsten føres inn i endocervix, og rotér x5. Skyll børsten raskt(10-15 sek) i beholderen med fikseringsløsning ved å trykke børsten mot bunnen x10 og rotér børsten til slutt. Børsten kastes.

Skru lokket godt igjen på beholderen, svart punkt på lokk skal stå over svart punkt på beholder. Skriv pasientens navn og fødselsnummer på beholderen, og fyll inn pasientopplysninger på remisse.

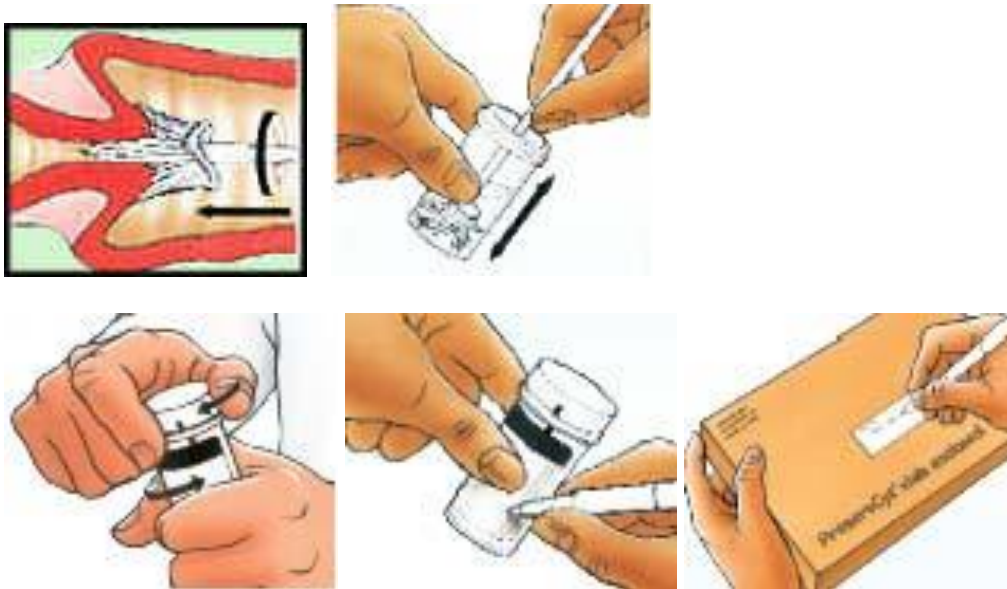

Bestille cytologiremisse

Alle remisser ligger nå tilgjengelig på Helse Bergen sine nettsider, og kan skrives ut derfra, se link:

<http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/patologi/Documents/Cytologi.pdf>

De kan også bestilles fra LKB pakkerom, telefon 55973134.

Bestille prøvetakingsutstyr for væskebasert cytologi

Kontakt LKB pakkerom, telefon 55973134.

Etter hvert som dere tar i bruk væskebasert cytologi vil det ikke lenger være nødvendig å sende inn separat prøvebeholder med materiale for HPV-test når det er indisert. Undersøkelse på HPV foretas fra samme beholder som celleprøven. Det er imidlertid fremdeles svært viktig at dere merker av at HPV test ønskes.

Oppdatert 23/4-2013.